



dataLink®

Solution d'étiquetage de boîtes de Petri

Nouveau logiciel


Toutes vos données sur la tranche de la boîte

interscience

Comment fonctionne dataLink® ?

Avec easySpiral®


Utilisez la solution tout automatique dataLink® sans paramétrage.

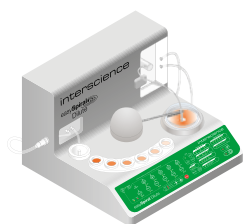

easySpiral®
Modèles pro, pro Milk
et Dilute



Import manuel
(lecteur code-barres, clavier)

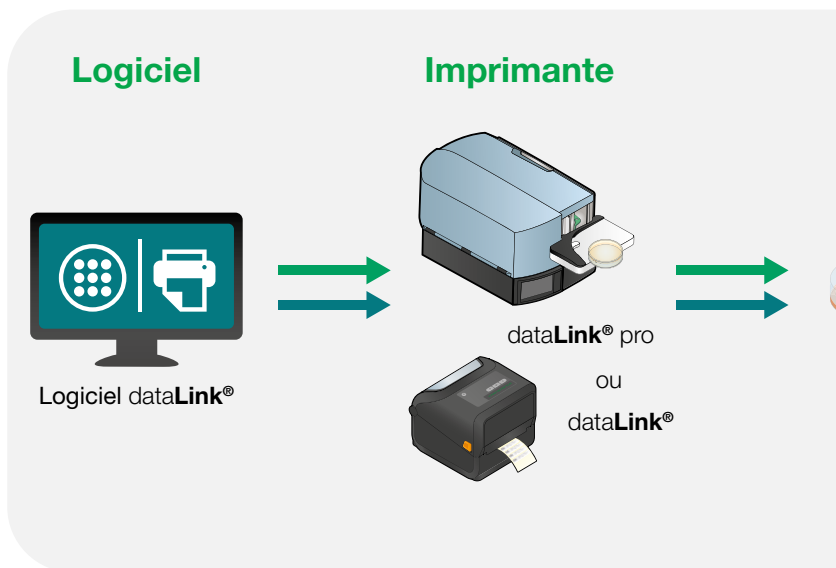

Sans easySpiral®

Créez des étiquettes personnalisées avec vos informations.

2 modèles d'étiquetage


dataLink®

L'essentiel

- Etiquetage manuel
- Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm



Étiquette dataLink® avec easySpiral®

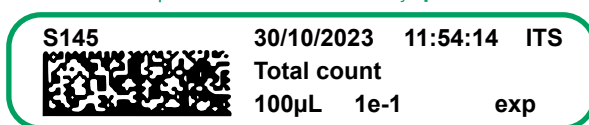

Exemple d'étiquette dataLink® sans easySpiral®






Pourquoi étiqueter sur la tranche de la boîte de Petri ?

En étiquetant sur la tranche plutôt que sur le couvercle, la traçabilité est garantie même en cas de mauvaise manipulation. Le comptage manuel ou automatique est également facilité.

Automatisation et efficacité

Connecté à l'ensemencement easySpiral®, le logiciel dataLink® reçoit **automatiquement les paramètres d'identification** de la boîte de Petri. Ils sont ensuite **encodés et édités sur une étiquette** apposée sur la boîte. Lors de la lecture du code, les informations sont transmises à un compteur Scan® ou à un ScanStation®. **Les réglages d'incubation ou de comptage de colonies sont automatisés.**

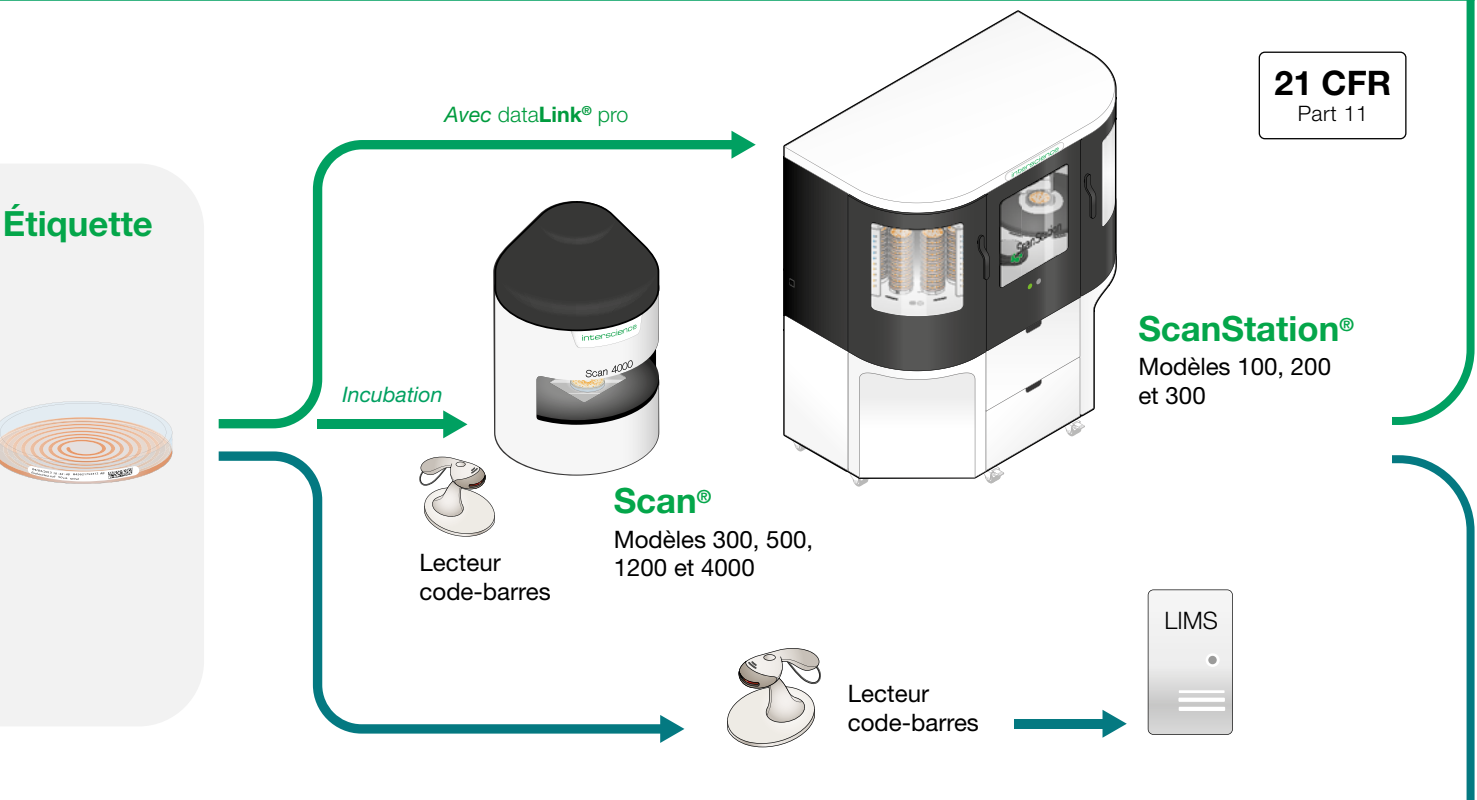

Flexibilité et personnalisation

Le logiciel dataLink® compile des données analytiques, obtenues par importation d'un fichier au format Excel™. **Vous pouvez paramétrer vos étiquettes en choisissant les données à intégrer.** Lisibles par un lecteur code-barres externe, les données peuvent être exportées dans un LIMS.

La solution dataLink® s'intègre à tous les environnements de travail.



dataLink® pro

Le choix premium

- Plateau d'étiquetage semi-automatisé
- Dimensions de l'étiquette : 50 x 5 mm
- Étiquette extra-basse compatible ScanStation®

Étiquette dataLink® pro avec easySpiral®

30/10/2023 11:54:14 S145 ITS
Total count 100µL 1e-1 exp



Exemple d'étiquette dataLink® pro sans easySpiral®

S145 30/10/2023 ITS
P212 1e-1 100µL



Spécifications techniques et accessoires



VUE GÉNÉRALE		
Suivi des paramètres d'ensemencement	✓	✓
Automatisation des réglages de comptage	✓	✓
Import des données brutes	✓	✓
Étiquetage personnalisé	✓	✓
Plateau d'étiquetage semi-automatisé	-	✓
Étiquette extra-basse compatible ScanStation®	-	✓
LOGICIEL		
Types de données	Volume, dilution, heure, mode de dépose, personnalisé	
Format des données	Entrée : alphanumérique Sortie : alphanumérique, code-barres, datamatrix	
Import/export des données	xlsx, csv, txt	
Langue	Anglais	
Gestion des comptes utilisateurs	✓	✓
Audit trail	✓	✓
IMPRIMANTE		
Type d'impression	Transfert thermique	
Dimension des étiquettes	50 x 10 mm	50 x 5 mm
Résolution d'impression	203 dpi	600 dpi
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
USB	1 port USB 2.0	1 port USB 2.0 Hi Speed, 1 port USB avant
Tension - Fréquence	100-240 V~ 50-60 Hz	
Garantie	1 an	
En conformité avec	21 CFR Part 11	
POIDS ET DIMENSIONS		
Dimensions (l x p x h)	26,7 x 20,2 x 18,9 cm	25,2 x 28,8 x 46 cm
Poids net	2,05 kg	12 kg
Dimensions emballage (l x p x h)	35 x 25 x 28,5 cm	70 x 35 x 40 cm
Poids brut	3,5 kg	16 kg
Contenu du pack	1 imprimante dataLink®, Logiciel dataLink®, 1 lecteur code-barres , 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB, 2 manuels d'utilisation, 1 film à transfert thermique, 1 mandrin, 2 rouleaux de 2500 étiquettes adhésives	1 imprimante dataLink® pro, Logiciel dataLink®, 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB, 2 manuels d'utilisation, 1 ruban de transfert thermique, 1 mandrin, 3 rouleaux de 2500 étiquettes adhésives

Produits fabriqués pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.



ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Réf. 410 120 Étiquettes pour imprimante (dataLink®) 2 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante dataLink® Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm	Réf. 439 170 Module identification automatique des boîtes Lecteur code-barres (1D) et datamatrix (2D) pour identification automatique des boîtes pour ScanStation® Réf. 522 000 Lecteur de codes-barres
Réf. 410 130 Film pour imprimante (dataLink®) Film à transfert thermique pour imprimante dataLink®	Réf. 439 051 Étiquettes pour imprimante (dataLink® pro) 3 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante dataLink® pro Dimensions de l'étiquette : 50 x 5 mm Réf. 439 052 Film pour imprimante (dataLink® pro) Film de transfert thermique pour imprimante dataLink® pro

Votre contact commercial

interscience

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61 - E-mail : info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770 - E-mail : sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007 - E-mail : sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642 - E-mail : sales.china@interscience.cn

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232 - E-mail : sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715 - E-mail : sales.japan@interscience.com