

JumboMix[®] 3500

Malaxeur d'échantillons grande capacité



Puissance et robustesse
pour vos gros échantillons

interscience

Capacité maximale jusqu'à 3750 mL !

Le malaxeur **JumboMix**® garantit une extraction microbiologique optimale par l'action de ses deux pales. Adapté à tout volume entre 200 mL et 3750 mL, il garantit l'homogénéisation en 30 à 60 s de tout échantillon jusqu'à 375 g.

Applications : *E. Coli O157:H7*, *Salmonella spp*, poudre de lait infantile, chocolat, contrôle de stérilité, parasites *Cryptosporidium* et *Giardia*, « pool » d'échantillons (ex : 15 échantillons de 25 g pour atteindre 375 g)...

Puissance et robustesse

- Capacité jusqu'à 3750 mL
- Idéal pour vos échantillons 375 g dilués au 1/10^e
- Silencieux

Ergonomie

- Arrêt des pâles côte-à-côte : insertion facile du sac
- Chariot tout inox 304L à hauteur ergonomique (en option)
- Écran digital

BREVETÉ

Nettoyage facile

- Tout acier inox
- Porte escamotable 270°
- Pales amovibles **Click & Clean**®

Sécurité

- La poignée verrouille et actionne le malaxeur
- Fermeture **Q-Tight**® : aucune fuite par le haut du sac
- Bac de sécurité



Garantie

- Amortisseurs et porte vitrée garantie **à vie**
- Garantie 3 ans (après validation de la carte)
- Made in France

BREVETÉ


Force de malaxage ajustable

- Adaptez la force de malaxage à votre échantillon
- Jusqu'à 22,6 kg de poussée : même les matrices les plus dures n'y résistent pas




Idéal pour vos applications :

- 375 g pour *Salmonella spp*
- 75, 325 ou 375 g d'échantillon pour *E.coli O157:H7*
- 125 g d'échantillon pour *Listeria & Listeria monocytogenes*
- « Pool » d'échantillons

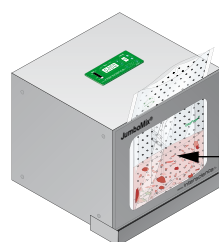

« POOL » D'ÉCHANTILLONS

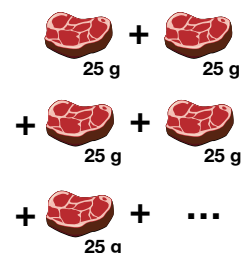

JumboMix® 3500

2 modèles disponibles :



JumboMix® 3500 P CC

> L'essentiel

Réf. 031 110



JumboMix® 3500 W CC

> La porte vitrée

Réf. 032 110



Spécifications techniques au dos de la brochure →

JumboLine®, la gamme 3500


Idéal pour vos préparations d'échantillons de 375 g dilués au 1/10^e !



DiluFlow® + JumboKit

Dilueur gravimétrique

DiluFlow® Elite - Réf. 503 205 • DiluFlow® Pro - Réf. 502 205 • JumboKit - Réf. 505 006

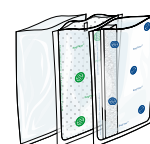

BagFilter®

Sac-filtre latéral pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 111 200

3500 mL - Réf. 113 510

BagPage®

Sac-filtre pleine page pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 122 200

3500 mL - Réf. 123 010

BagLight®

Sac pour malaxeurs

2000 mL - Réf. 132 200

3500 mL - Réf. 133 025



JumboStand

Chariot Ergonomique

Réf. 037 000



BagOpen® 3500

Portoir ouvre-

Réf. 211 350



BagRack® 3500

Portoir de sacs

2 comp. - Réf. 221 352

4 comp. - Réf. 221 350



BagClip® 3500

Barrette de fermeture

Réf. 231 350



BagPipet® & BagTips®

Pipette - Réf. 251 091

Embouts - Réf. 252 024

Q-Tight® ScanStation® sont des marques déposées, INTERSENCE s'en réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interse.com pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Verseilles, FRANCE

JumboMix® 3500 P CC : 1 cordon d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 pack de sacs pour malaxeur, 1 certificat de conformité / carte de garantie.
JumboMix® 3500 W CC : 1 bac de récupération, 1 cordon d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 pack de sacs pour malaxeur, 1 certificat de conformité / carte de garantie



ScanStation®
Station d'incubation et
de comptage en temps réel

Tél. : +81 3 6712 9715 - E-mail : sales.japan@interscience.com