



data**Link**

Solution d'étiquetage de boîtes de Petri


Toutes vos données sur la tranche de la boîte

interscience

Comment fonctionne dataLink ?

Avec easySpiral

Utilisez la solution tout automatique dataLink sans paramétrage.

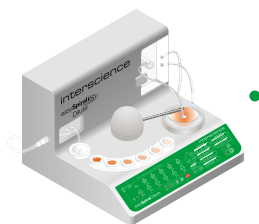


easySpiral

Modèles pro, pro Milk
et Dilute



Import manuel
(lecteur code-barres, clavier)

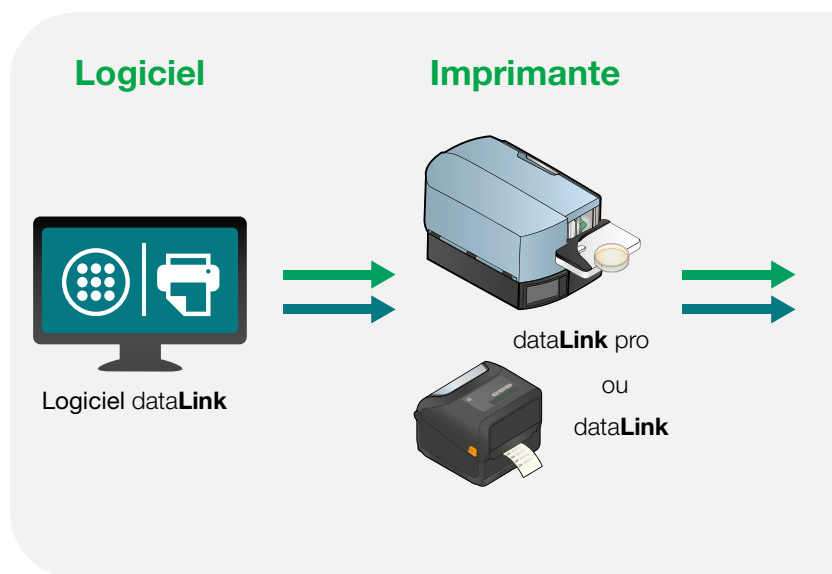

Sans easySpiral

Créez des étiquettes personnalisées avec vos informations.

2 modèles d'étiquetage

dataLink

L'essentiel

- Etiquetage manuel
- Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm



Étiquette dataLink avec easySpiral

S145	30/10/2023	11:54:14	ITS
Total count			
100µL	1e-1	exp	

Exemple d'étiquette dataLink sans easySpiral

◆ Flore totale Echantillon145	
-------------------------------	---




Pourquoi étiqueter sur la tranche de la boîte de Petri ?

En étiquetant sur la tranche plutôt que sur le couvercle, la traçabilité est garantie même en cas de mauvaise manipulation. Le comptage manuel ou automatique est également facilité.

Automatisation et efficacité

Connecté à l'ensemencur easySpiral, le logiciel dataLink reçoit **automatiquement les paramètres d'identification** de la boîte de Petri. Ils sont ensuite **encodés et édités sur une étiquette** apposée sur la boîte. Lors de la lecture du code, les informations sont transmises à un compteur **Scan** ou à un **ScanStation**. Les **réglages d'incubation ou de comptage de colonies sont automatisés**.

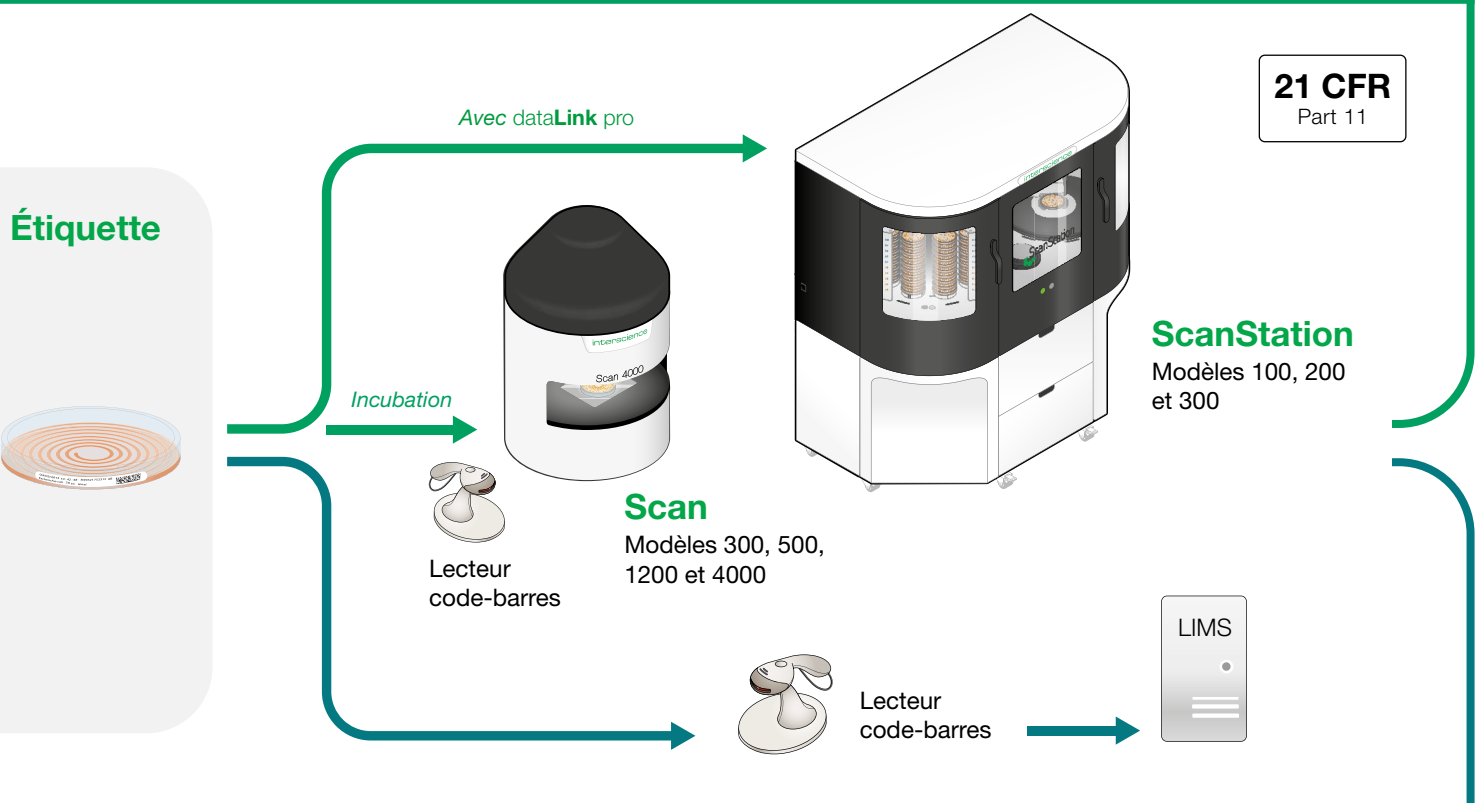

Flexibilité et personnalisation

Le logiciel dataLink compile des données analytiques, obtenues par importation. **Vous paramétrez vos étiquettes en choisissant les données à intégrer**, qui peuvent ensuite être exportées dans un LIMS. dataLink s'intègre à tous les environnements de travail.

◆ Flore totale Echantillon145 

24 symboles d'identification



Texte personnalisé sur 1 ou 2 lignes

73 caractères max, variable en fonction des caractères et options facultatives


Codes à barres

Datamatrix
Code QR
Code 39, 128

dataLink pro

Le choix premium

- Plateau d'étiquetage semi-automatisé
- Dimensions de l'étiquette : 50 x 5 mm
- Étiquette extra-basse compatible ScanStation

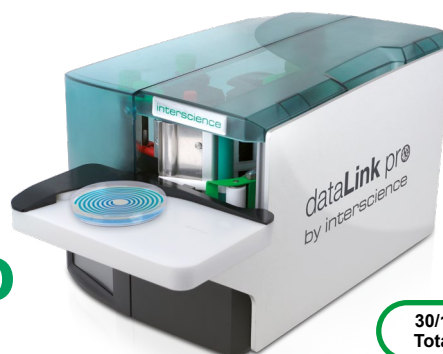

Étiquette dataLink pro avec easySpiral

30/10/2023 11:54:14 S145 ITS
Total count 100µL 1e-1 exp



Exemple d'étiquette dataLink pro sans easySpiral

◆ Flore totale Echantillon145



Spécifications techniques et accessoires



VUE GÉNÉRALE		
Identification et traçabilité de l'échantillon	✓	✓
Automatisation des réglages de comptage	✓	✓
Import des données brutes	✓	✓
Étiquetage personnalisé	✓	✓
Plateau d'étiquetage semi-automatisé	-	✓
Étiquette extra-basse compatible ScanStation	-	✓

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Type d'étiquetage	Manuel	Semi-Automatisé
Qté d'étiquettes collées par minute	Manuel	20
Connexion	USB	Réseau ou USB
USB	1 port USB 2.0	1 port USB 2.0 Hi Speed, 1 port USB avant
Tension - Fréquence	100-240 V~ 50-60 Hz	
Garantie	1 an	
En conformité avec	21 CFR Part 11	

LOGICIEL		
Types de données	Volume, dilution, heure, mode de dépose, personnalisé	
Format des données	Entrée : alphanumérique / Sortie : alphanumérique, code-barres, datamatrix	
Import/export des données	Automatique : csv / Manuel : txt, xlsx	
Langue	Anglais	
Gestion des comptes utilisateurs	Local ou LDAP	
Audit trail	✓	✓

IMPRIMANTE		
Type d'impression	Transfert thermique	
Ecran LCD	-	✓
Dimension des étiquettes	50 x 10 mm	50 x 5 mm
Résolution d'impression	203 dpi	600 dpi

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Système d'exploitation	Windows™ 10 ou 11	
Processeur	Intel i5, 2,8 GHz, quad Core (ou plus)	
RAM	4 Go	
Équipement	4 ports USB libres	4 ports USB libres et/ou 1 port RJ45
Résolution Écran	1280 x 1024 pixels (ou plus)	

POIDS ET DIMENSIONS		
Dimensions (l x p x h)	26,7 x 20,2 x 18,9 cm	25,2 x 28,8 x 46 cm
Poids net	2,05 kg	12 kg
Dimensions emballage (l x p x h)	35 x 25 x 28,5 cm	70 x 35 x 40 cm
Poids brut	3,5 kg	16 kg

Contenu du pack	1 imprimante dataLink, Logiciel dataLink, 1 lecteur code-barres, 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB, 2 manuels d'utilisation, 1 film à transfert thermique, 1 mandrin, 2 rouleaux de 2500 étiquettes adhésives	1 imprimante dataLink pro, Logiciel dataLink, 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB, 2 manuels d'utilisation, 1 ruban de transfert thermique, 1 mandrin, 3 rouleaux de 2500 étiquettes adhésives
-----------------	--	---

ACCESSOIRES dataLink

Étiquettes pour imprimante

2 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante thermique
Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm

Réf. 410 120

Film pour imprimante

Film à transfert thermique pour imprimante

Réf. 410 130

ACCESSOIRES dataLink pro

Kit d'identification automatique des boîtes de Petri

Lecteur code-barres (1D) et datamatrix (2D) et plateau tournant pour identification automatique des boîtes de Petri avec ScanStation

Réf. 439 170

Lecteur de codes-barres

Lecteur code-barres (1D / 2D)

Réf. 522 000

Étiquettes pour imprimante (dataLink pro)

3 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante dataLink pro
Dimensions de l'étiquette : 50 x 5 mm

Réf. 439 051

Film pour imprimante (dataLink pro)

Film de transfert thermique pour imprimante dataLink pro

Réf. 439 052

Produits fabriqués pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.



Votre contact commercial

interscience

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61 - E-mail : info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770 - E-mail : sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007 - E-mail : sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642 - E-mail : sales.china@interscience.cn

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232 - E-mail : sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715 - E-mail : sales.japan@interscience.com