仕様、アクセサリー



dataLink
データリンク
Ref. 410 100



dataLink pro
データリンク プロ
Ref. 439 050

概要		
サンプルのアイデンティフィケーション及びトレーサビリティ	✓	✓
カウンティング設定 の自動化	✓	✓
生データのインポート	✓	✓
カスタマイズされたラベル	✓	✓
半自動ラベリングトレイ	-	✓
ScanStation 対応極低ラベル	-	✓
仕様		
ラベリング方式	マニュアル	半自動
1 分あたりのラベル貼付枚数	マニュアル	20
接続	USB	ネットワーク又は USB
USB	USB 2.0 ポート 1 個	USB 2.0 Hi-Speed ポート 1 個、前面 USB ポート 1 個
電圧 - 周波数	100-240 V~ 50-60 Hz	
保証期間	1 年	
準拠規格	21 CFR Part 11	
ソフトウェア		
データタイプ	容量、希釈率、時刻、塗抹方法、カスタマイズ	
データ形式	入力：英数字／出力：英数字、バーコード、データマトリックス	
データインポート／エクスポート	自動：CSV／マニュアル：txt、xlsx	
言語	英語	
ユーザーアカウント管理	ローカル又は LDAP	
監査証跡	✓	✓
プリンター		
印刷方式	感熱転写	
LCDスクリーン	-	✓
ラベルサイズ	50 x 10 mm	50 x 5 mm
印刷解像度	203 dpi	600 dpi
PCの最小要件		
オペレーティングシステム	Windows™ 10 又は 11	
プロセッサー	Intel i5、2.8GHz、クアッドコア（又はそれ以上）	
RAM	4 Go	
接続端子	空き USB ポート 4 個	空き USB ポート 4 個、又は RJ45 ポート 1 個
画面解像度	1280×1024 ピクセル（又はそれ以上）	
重量とサイズ		
サイズ（幅×奥行×高さ）	26.7 x 20.2 x 18.9 cm	25.2 x 28.8 x 46 cm
重量	2.05 kg	12 kg
ボックスサイズ（幅×奥行×高さ）	35 x 25 x 28.5 cm	70 x 35 x 40 cm
総重量	3.5 kg	16 kg
パッケージ内容	**dataLink** プリンター 1 台、**dataLink** ソフトウェア、バーコードリーダー 1 台、電源コード 1 本、USB ケーブル 1 本、ユーザーマニュアル 2 冊、感熱転写フィルム 1 枚、ロールの芯 1 個、粘着ラベル 2500 枚入り 2 ロール	**dataLink** pro プリンター 1 台、**dataLink** ソフトウェア、電源コード 1本、USB ケーブル 1 本、ユーザーマニュアル 2 冊、感熱転写リボン 1 個、ロールの芯 1 個、粘着ラベル 2500 枚入り 3 ロール

dataLink アクセサリー

プリンターラベル
サーマルプリンター用
2500 枚入り 2 ロール
ラベルサイズ：50 x 10 mm
Ref. 410 120

プリンター用フィルム
プリンター用感熱転写フィルム
Ref. 410 130

dataLink pro アクセサリー

シャーレ自動アイデンティフィケーション・キット
ScanStation 対応シャーレ自動アイデンティフィケーションのためのバーコード (1D) とデータマトリックス (2D) リーダー及びターンテーブル
Ref. 439 170

バーコードリーダー
バーコードリーダー (1D/2D)
Ref. 522 000

プリンター用ラベル (**dataLink** pro)
dataLink pro プリンター用ラベル 2500 枚入り 3 ロール
ラベルサイズ：50 x 5 mm
Ref. 439 051

プリンター用感熱転写フィルム (**dataLink** pro)
dataLink pro プリンター用感熱転写フィルム
Ref. 439 052

ISO 9001 認証取得済の設計・製造工場

WEEE 2002/96/EC　RoHS 2002/95/EC

CE UKCA

代理店

interscience
140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS
Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT
Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON
Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI
Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE
Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

BRO_005382_00007877 dataLink_01_02_JP は商標登録されています。このパンフレットの写真と情報は、契約上の拘束力を持ちません。このパンフレットはフランス語版からの翻訳で 契約上の拘束力を持ちません。インターサイエンスは、製品の仕様を予告なしに変更または改善する権利を もちます。最新情報と追加情報について は、www.interscience.com をご覧ください。RCS 960 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.
JP



dataLink

シャーレ用ラベリング・ソリューション


全データをシャーレの側面に

interscience

dataLink のワークフロー

easySpiral を使用する場合

全自動 dataLink ソリューションを使用すると、パラメータを設定する必要はありません。

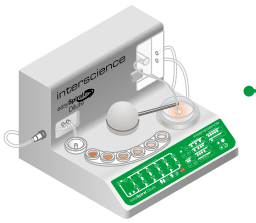

easySpiral
モデル Pro、Pro Milk 及び Dilute

LIMS

XLS


マニュアル式インプット
(バーコードリーダー及びキーボード)

ソフトウェア

プリンター



dataLink ソフトウェア

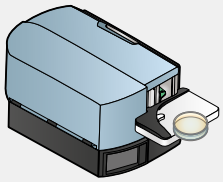

dataLink pro

または

dataLink

easySpiral を使用しない場合

ラベルをカスタマイズして作成します。

2 種類のラベルフォーマット



dataLink

エッセンシャル

- マニュアル式ラベリング
- ラベルサイズ：50 x 10 mm

easySpiral 使用の dataLink ラベルの例

S145 30/10/2023 11:54:14 ITS
Total count
100µL 1e-1 exp


easySpiral なしの dataLink ラベルの例

◆ Total count サンプル 145

なぜシャーレの側面にラベルを貼るのですか？
蓋ではなく側面にラベルを貼ることで、万一取り違えが発生してもトレーサビリティが確保されます。マニュアル式または自動のカウントにも適しています。

自動化、効率化

easy**Spiral** プレーター本体に接続すると、自動的にシャーレの個々のパラメータ情報がソフトウェアに送信されます。これらの情報は、エンコード後編集され、その後ラベルにプリント、シャーレに貼付されます。このコードが読み込まれると、その情報が **Scan** コロニーカウンターまたは **ScanStation** に送信され、インキュベーションとコロニーカウントのためのセッティングが自動化されます。

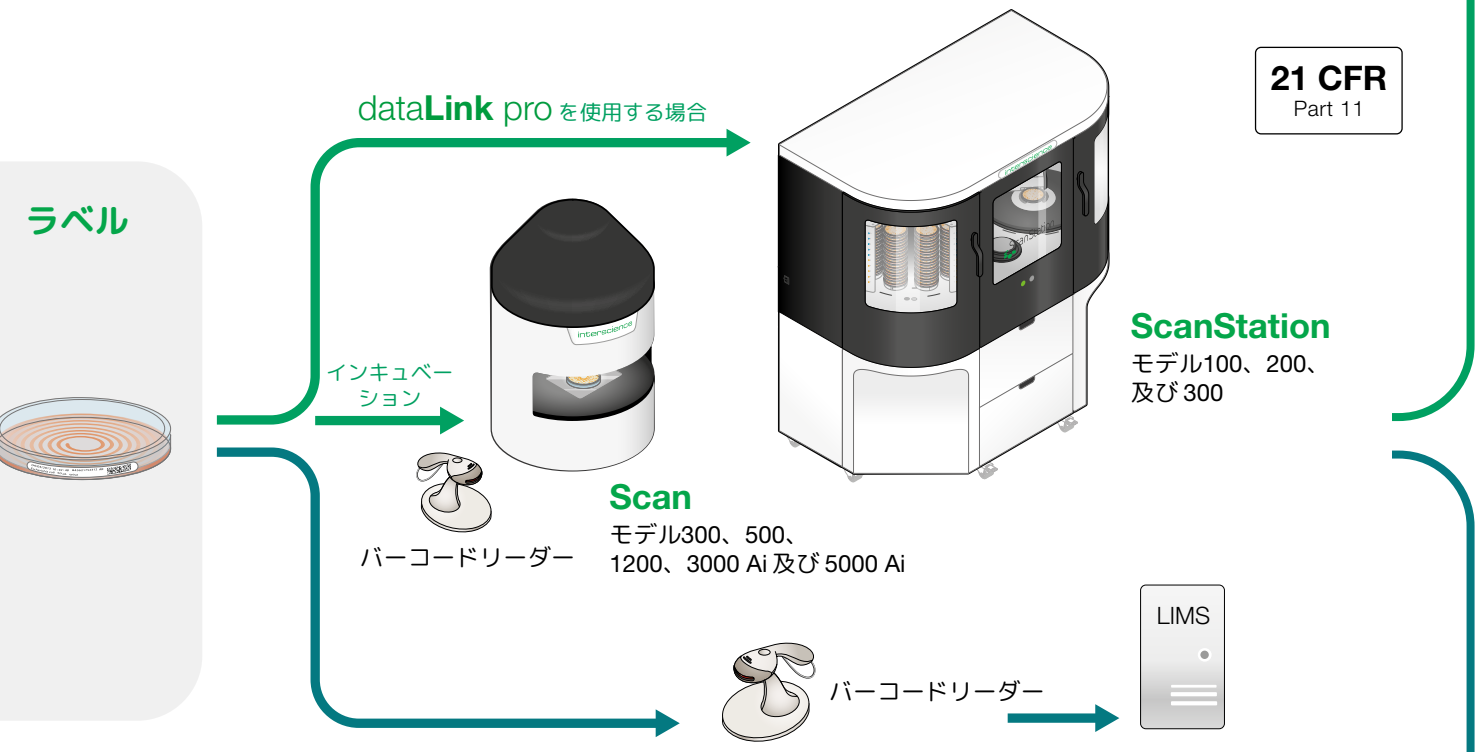

柔軟性とカスタマイズ性


data**Link** ソフトウェアは、インポートにより取得した分析データを取り込みます。統合するデータを選択することでラベルを設定し、その後、LIMS にエクスポートすることができます。data**Link** は、あらゆる作業環境に統合可能です。

◆ Total Count サンプル 145

アイデンティフィケーションのための 24 個のシンボル

1 行又は 2行のカスタムテキスト
最高 73 文字まで
(文字とオプションにより変動)

バーコード
Datamatrix
QR コード
コード 39、128

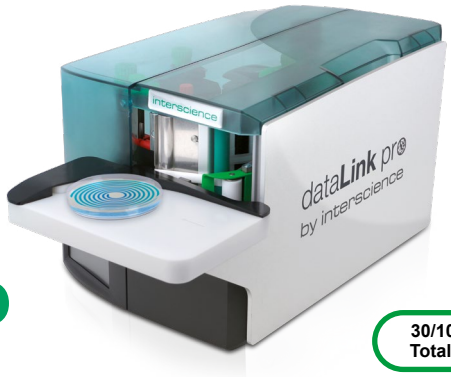

data**Link pro**

プレミアム チョイス

- 半自動ラベリング トレイ
- ラベルサイズ：50 x 5 mm
- **ScanStation** 用極低ラベル

easy**Spiral** 使用の data**Link** pro ラベルの例

30/10/2023 11:54:14 S145 ITS
Total count 100µL 1e-1 exp

easy**Spiral** なしの data**Link** pro ラベルの例

◆ Total count サンプル 145