


## BagFilter® XF

Sac-filtre latéral pour malaxeur, extra-fin. Haute filtration

Réf. 111 325 (400 mL)

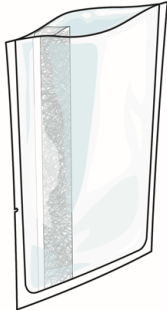

Certification:



Fabrication:



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

**BagFilter® XF** est un sac-filtre avec un filtre latéral non-tissé pour les analyses microbiologiques. Il est conçu notamment les échantillons contenant de fines particules. Il est idéal pour une utilisation optimale des systèmes d'analyses à capillaires (cytométrie en flux, PCR, qPCR, Spiral...).

La charge bactérienne est extraite de l'échantillon lors du process de malaxage et constitue un filtrat. Ce dernier est pipeté sans particules, sans éléments organiques

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre latéral
- Idéal pour l'utilisation des systèmes d'analyses à capillaires (PCR, cytométrie en flux...)
- Idéal pour les échantillons contenant de fines particules (poudres, poussières, épices...)
- Idéal pour séparer les éléments organiques du filtrat (gras, sucre, excipients...)
- **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
- Filtre latéral non-tissé.
- Porosité du filtre < 20 microns
- Rigide et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Approuvé contact alimentaire : Règlement CE N° 1935/2004
- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de vie moyenne : 25 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- Disponible en 400 mL
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### BagFilter® XF 400

Réf : 111 325

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 22 x 15 cm, poids : 5 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500