


BagPage® + Breveté

Sac-filtre pleine page pour malaxeur

Réf. 121 025 (100 mL) - Réf. 122 025 (400 mL) - Réf. 122 200 (2000 mL) - Réf. 123 010 (3500 mL)

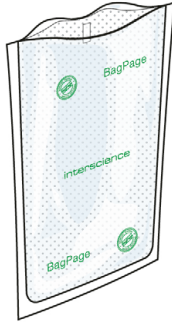

Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagPage® + est un sac-filtre pleine page. Les deux compartiments du sac sont séparés par un filtre non-tissé pleine surface. La flore bactérienne est extraite de l'échantillon et passe à travers le filtre pendant l'homogénéisation. Il est ensuite facile de pipeter un filtrat sans particule ou résidus de l'échantillon.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre pleine page
- Idéal pour homogénéiser des échantillons pâteux
- **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
- Filtre pleine page micro-perforé.
- Porosité du filtre 280 microns
- Rigide et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Approuvé contact alimentaire : Règlement CE N° 1935/2004
- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de vie moyenne : 25 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- Disponible en 100/400/2000/3500 mL
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

BagPage® 100

Réf. : 121 025

- Volume max pour le malaxage : 100 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 50 mL
- Dimensions sac : 95 x 180 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 12 cm, poids : 2 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagPage® + 400

Réf. : 122 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 26 cm, poids : 6 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagPage® + 2000

Réf. : 122 200

- Volume max pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL
- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Dimensions carton : 47,5 x 28,5 x 13,5 cm, poids : 4,9 kg
- Pochette de 25
- Carton de 250

BagPage® + 3500

Réf. : 123 010

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL
- Dimensions sac : 380 x 600 mm
- Dimensions carton : 41 x 33,5 x 11 cm, poids : 4,2 kg
- Pochette de 10
- Carton de 100

BagPage® + 400 non marqué

Réf. : 122 000

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 26 cm, poids : 6 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500